

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

สารบัญ

1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน

หน้า 1

1.1 การติดตั้งภาษา python

2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม foci detector

หน้า 4

3. คู่มือการใช้โปรแกรม


หน้า 7

1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน

1.1 การติดตั้งภาษา python

url ติดตั้งสำหรับ Window: <https://www.python.org/downloads/windows/>

url ติดตั้งสำหรับ Mac OS X: <https://www.python.org/downloads/mac-osx/>

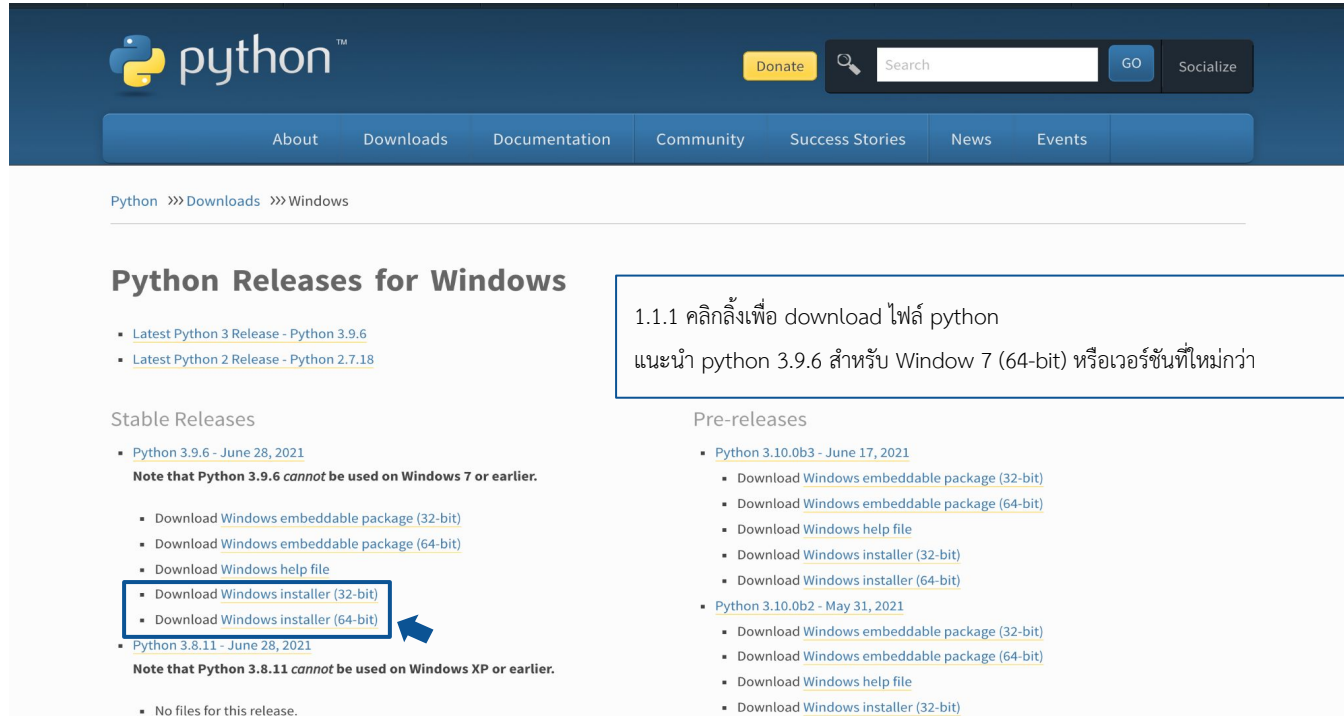

Python Releases for Windows

- [Latest Python 3 Release - Python 3.9.6](#)
- [Latest Python 2 Release - Python 2.7.18](#)

Stable Releases

- [Python 3.9.6 - June 28, 2021](#)
Note that Python 3.9.6 cannot be used on Windows 7 or earlier.
 - [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
 - [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
 - [Download Windows help file](#)
 - [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
 - [Download Windows installer \(64-bit\)](#)
- [Python 3.8.11 - June 28, 2021](#)
Note that Python 3.8.11 cannot be used on Windows XP or earlier.
 - No files for this release.

Pre-releases

- [Python 3.10.0b3 - June 17, 2021](#)
 - [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
 - [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
 - [Download Windows help file](#)
 - [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
 - [Download Windows installer \(64-bit\)](#)
- [Python 3.10.0b2 - May 31, 2021](#)
 - [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
 - [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
 - [Download Windows help file](#)
 - [Download Windows installer \(32-bit\)](#)



1.1.1 คลิกลิงก์เพื่อ download ไฟล์ python

แนะนำ python 3.9.6 สำหรับ Window 7 (64-bit) หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

1.1.2 เมื่อ download แล้วจะได้ไฟล์ .exe ให้คลิกเพื่อทำการติดตั้ง python



1.1.3 คลิก “Install Now” เพื่อทำการติดตั้ง

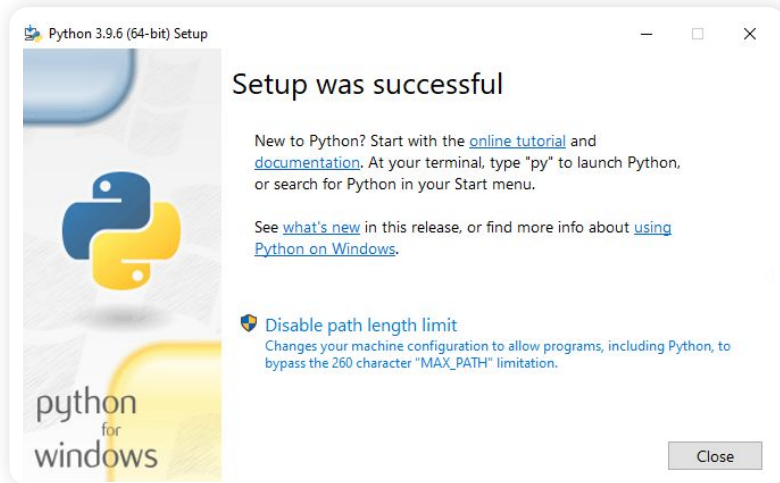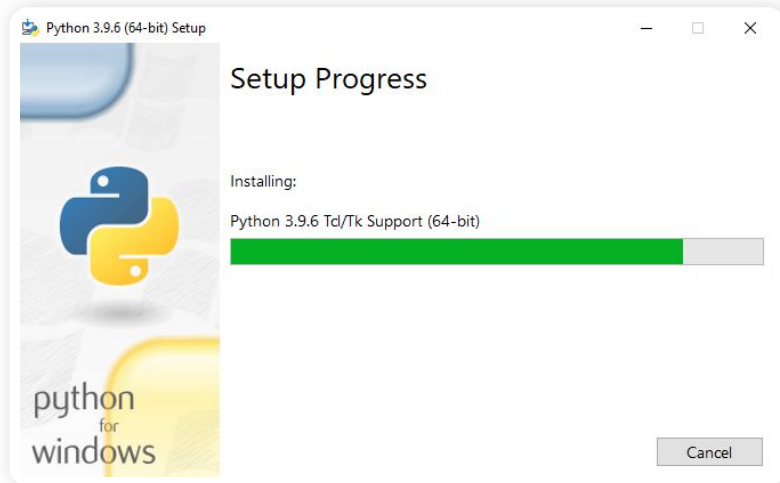

1.1.4 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว

จะขึ้นหน้าต่างว่า "Setup was successful"

เป็นการติดตั้งอย่างสมบูรณ์ จากนั้นให้เรากด "Close"

2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม foci detector

2.1 download ไฟล์ของโปรแกรมได้ที่ลิงก์ github

url: https://github.com/si-medbif/dengue_foci

The screenshot shows the GitHub repository page for `si-medbif/dengue_foci`. The repository is private. The 'Code' button is highlighted with a blue box and a red arrow pointing to a blue box with the number '1'. The 'Download ZIP' option in the dropdown menu is highlighted with a blue box and a red arrow pointing to a blue box with the number '2'.

File	Action
README.md	Update README.md
app_window.py	Add files via upload
config.ini	Add files via upload
foci_detection.py	Update foci_detection.py
requirements.txt	Add files via upload

2.2 เมื่อ download แล้วให้แตกไฟล์ zip

2.3 ติดตั้ง library




Command Prompt
App

2.3.1 เปิด command Prompt จะได้หน้าต่างตามภาพดังต่อไปนี้

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1083]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\HOME>
```

2.3.2 พิมพ์ cd และตามด้วยตำแหน่ง path ของไฟล์ที่ download ในข้อ 2.2 เพื่อเปลี่ยน directory ไปยังไฟล์ที่เก็บ requirements.txt

 requirements.txt	14/7/2564 16:27	Text Document	1 KB
--	-----------------	---------------	------

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1083]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\HOME>d:
D:\>cd D:\internship\code\Python_configparser\
D:\internship\code\Python_configparser>
```

2.3.3 พิมพ์ pip install -r requirements.txt

เพื่อติดตั้ง library

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1083]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HOME>d:

D:\>cd D:\internship\code\Python_configparser\

D:\internship\code\Python_configparser>pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: numpy==1.21.0 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (1.21.0)
Requirement already satisfied: pandas==1.3.0 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: statistics==1.0.3.5 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (1.0.3.5)
Requirement already satisfied: opencv-python==4.5.3.56 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (4.5.3.56)
Requirement already satisfied: os-win==5.4.0 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (5.4.0)
Requirement already satisfied: configparser==5.0.2 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (5.0.2)
Requirement already satisfied: pytz==2017.3 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from pandas==1.3.0->-r requirements.txt (line 2)) (2021.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7.3 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from pandas==1.3.0->-r requirements.txt (line 2)) (2.8.0)
Requirement already satisfied: docutils>=0.3 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from statistics==1.0.3.5->-r requirements.txt (line 3)) (0.17.1)
Requirement already satisfied: oslo.utils>=4.7.0 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from os-win==5.4.0->-r requirements.txt (line 5)) (4.9.2)
Requirement already satisfied: oslo.log>=3.36.0 in c:\users\home\appdata\local\programs\python\python37-32\lib\site-packages (from os-win==5.4.0->-r requirements.txt (line 5)) (4.6.0)
```

library ที่ติดตั้ง

```
1  numpy == 1.21.0
2  pandas == 1.3.0
3  statistics == 1.0.3.5
4  opencv-python == 4.5.3.56
5  os-win == 5.4.0
6  configparser ==5.0.2
```

3. คู่มือการใช้โปรแกรม

app_window.py	วันนี้ 00:37	4 KB	Python Script
config.ini	วันนี้ 00:37	241 ไบต์	เอกสาร
foci_detection.py	วันนี้ 00:37	5 KB	Python Script
README.md	วันนี้ 00:37	190 ไบต์	Markdown File

3.1 คลิกที่ไฟล์ config.ini เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

config.ini - Notepad
File Edit Format View Help

[Paths]

plate_name = P1

input_image_folder = D:\internship\files_from_pton\foci_counter-P1-DV4-day60\1-figure_P1-DV4-day60

output_image_folder = D:\internship\code\Python_configparser\output

[Parameters]

border_margin = 0

min_foci_size = 9

3.1.1 ตั้งชื่อ plate


3.1.2 กำหนดตำแหน่ง path ของโฟลเดอร์ที่มี
ไฟล์รูปภาพที่ต้องการจะระบุจุดโฟกัส

3.1.3 สร้างโฟลเดอร์ output และ กำหนดตำแหน่ง
path ของโฟลเดอร์นั้น เพื่อให้โปรแกรมส่งผลลัพธ์ไปยัง
โฟลเดอร์นั้น


3.1.4 กำหนดขอบ margin ในการระบุ
ขอบวงกลมของงานเพาะเชื้อ

3.1.5 กำหนดขนาด pixel
เล็กสุดที่จะระบุว่าเป็น foci

Input folder

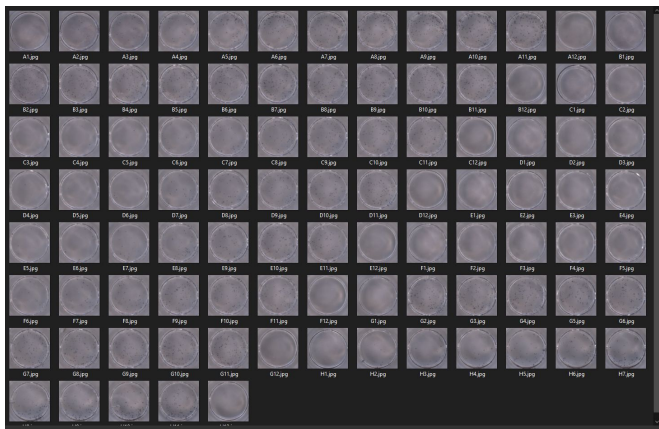

Output folder

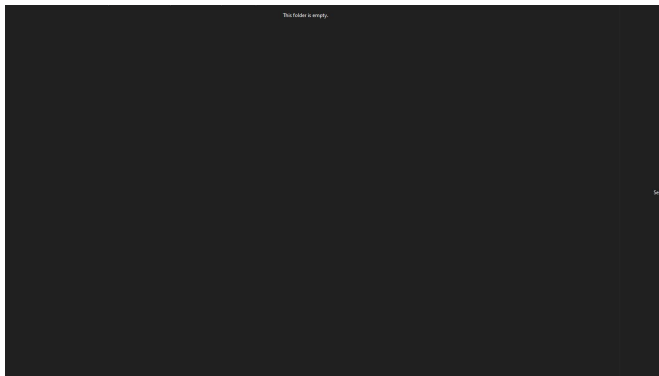




ตัวอย่างข้อมูลตาม path ที่กำหนดใน
parameter : input_image_folder

เพิ่มเติม โพลเดอร์ดังกล่าวจะเก็บไฟล์ภาพ(.jpg)
ของแต่ละ plate เท่านั้น


ตัวอย่างข้อมูลตาม path ที่กำหนดใน
parameter : output_image_folder

เพิ่มเติม โพลเดอร์ดังกล่าวเป็นโพลเดอร์ใหม่ที่
ข้อมูลใดๆอยู่ในโพลเดอร์

	app_window.py	00:37	4 KB	Python Script
	config.ini	00:37	241 ไบต์	เอกสาร
	foci_detection.py	00:37	5 KB	Python Script
	README.md	00:37	190 ไบต์	Markdown File


3.2 คลิกขวาที่ไฟล์

app_window.py > Open with > Python
เพื่อสั่งให้ทำงานด้วย python

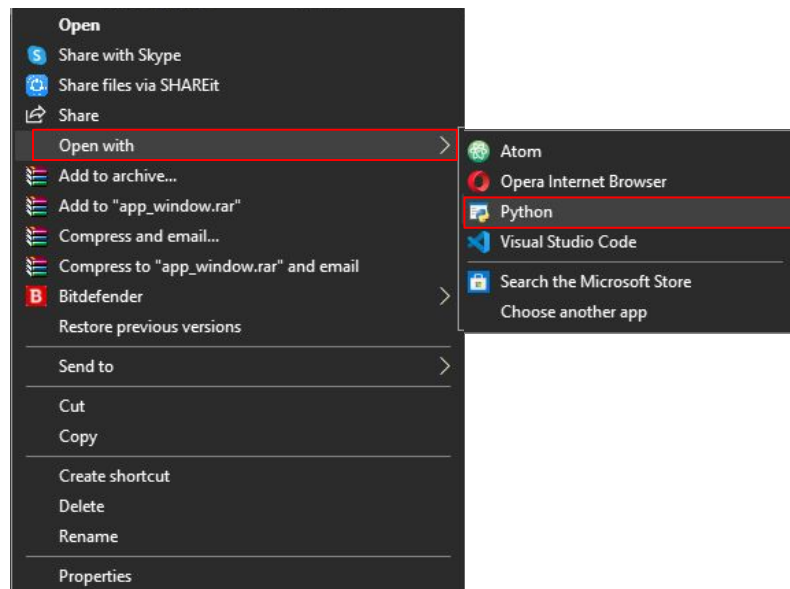


Output folder


เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์อยู่ในโฟลเดอร์ output ที่ระบุตำแหน่ง path ไว้

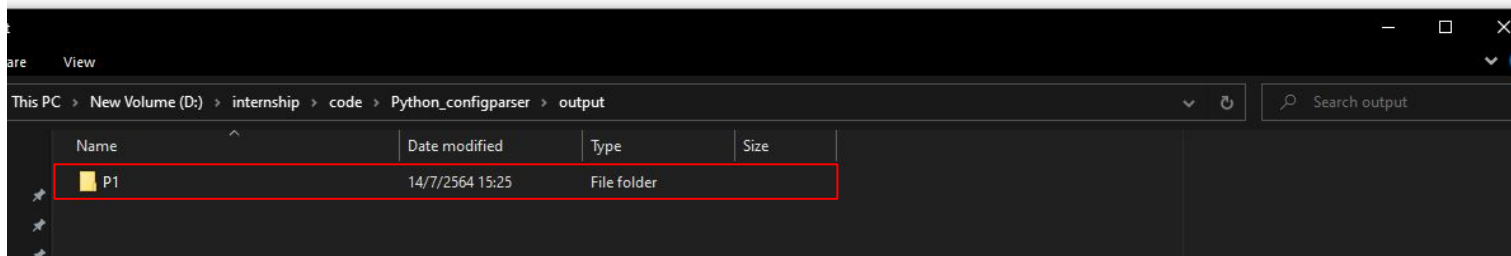

ผลลัพธ์จะประกอบด้วย:



- 1) folder “binary_image”
- 2) folder “foci_description”
- 3) folder “raw_box”
- 4) folder “raw_number”
- 5) “foci_count_result.csv”
- 6) “logfile.log”

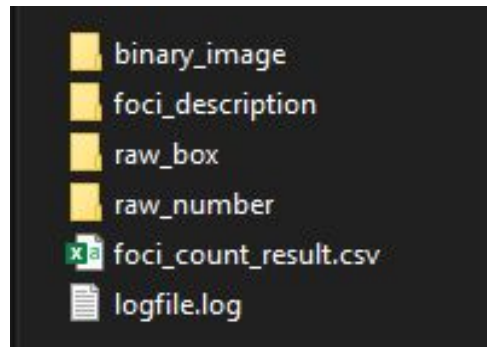

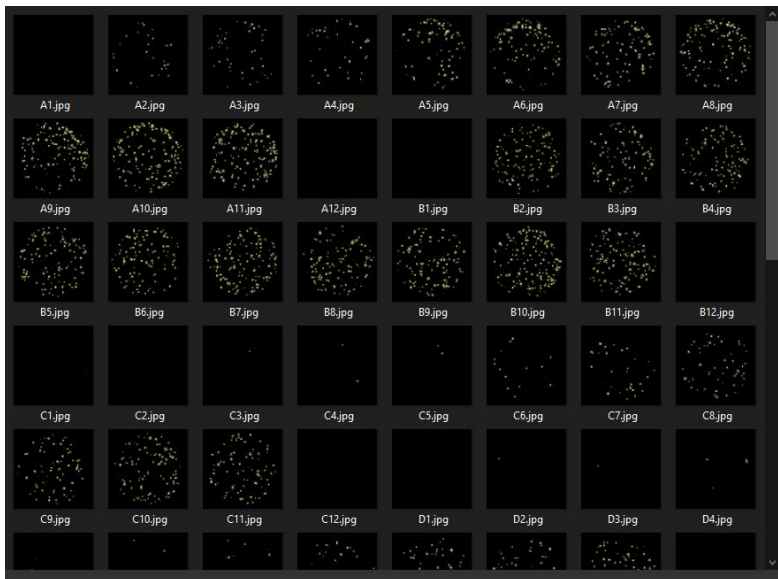

ตัวอย่างข้อมูลภายในโฟลเดอร์ binary_image

เพิ่มเติม โฟลเดอร์ดังกล่าวจะเก็บไฟล์ภาพ(.jpg)
โดยเป็นลักษณะภาพ binary image ที่มีการวง
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระบุแต่ละ foci เอาไว้

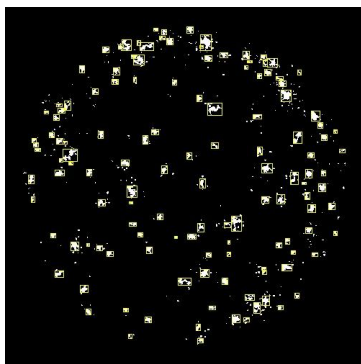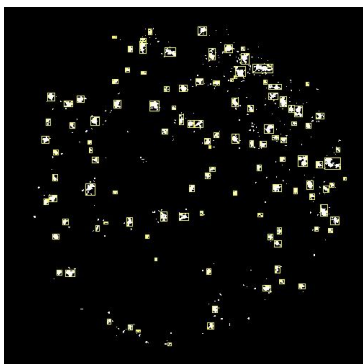

ตัวอย่างข้อมูลภายในโฟลเดอร์ foci_description

Name	Date modified	Type	Size
A1.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
A2.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
A3.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
A4.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
A5.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	2 KB
A6.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
A7.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
A8.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
A9.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
A10.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	4 KB
A11.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	4 KB
A12.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
B1.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
B2.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B3.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B4.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B5.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B6.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B7.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	4 KB
B8.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B9.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B10.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	4 KB
B11.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	3 KB
B12.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
C1.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
C2.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
C3.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
C4.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB
C5.csv	14/7/2564 15:25	Microsoft Excel C...	1 KB



เพิ่มเติม โฟลเดอร์ดังกล่าวจะเก็บไฟล์ข้อมูล(.csv)
โดยเป็นรายละเอียดของ จุดศูนย์กลางของแต่ละ
foci, ขนาดในหน่วย pixels และ Normalize area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	id	centroid_x	centroid_y	area_pixels	Normalize Area %				
1	0	1	190	51	12	0.007			
2	1	2	215	51	21	0.0122			
3	2	3	225	63	34	0.0198			
4	3	4	279	91	29	0.0169			
5	4	5	187	110	20	0.0116			
6	5	6	251	129	32	0.0186			
7	6	7	115	132	27	0.0157			
8	7	8	281	147	42	0.0244			
9	8	9	74	181	21	0.0122			
10	9	10	252	185	27	0.0157			
11	10	11	395	188	36	0.0209			
12	11	12	360	190	13	0.0076			
13	12	13	372	193	36	0.0209			
14	13	14	242	231	43	0.025			
15	14	15	33	245	18	0.0105			
16	15	16	33	267	30	0.0174			
17	16	17	282	268	27	0.0157			
18	17	18	351	291	22	0.0128			
19	18	19	376	312	39	0.0227			
20	19	20	356	317	49	0.0285			
21	20	21	364	335	19	0.0111			
22	21	22	337	338	31	0.018			
23	22	23	56	348	66	0.0384			
24	23	24	275	382	39	0.0227			
25	24	25	319	378	13	0.0076			



ตัวอย่างข้อมูลภายในโฟลเดอร์ raw_box



เพิ่มเติม โฟลเดอร์ดังกล่าวจะเก็บไฟล์ภาพ(.jpg)
โดยเป็นลักษณะภาพที่มีการวงกรอบสีเหลืองผืนผ้า
ระบุแต่ละ foci

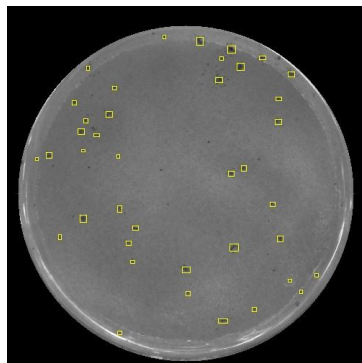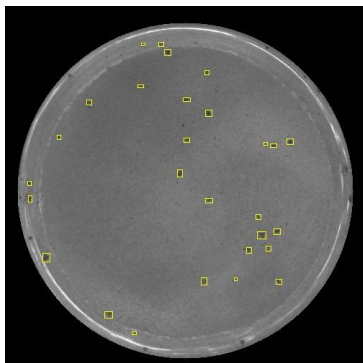




ตัวอย่างข้อมูลภายในโฟลเดอร์ raw_number

เพิ่มเติม โฟลเดอร์ดังกล่าวจะเก็บไฟล์ภาพ(.jpg)
โดยเป็นลักษณะภาพที่มีการระบุเลข id แต่ละ foci

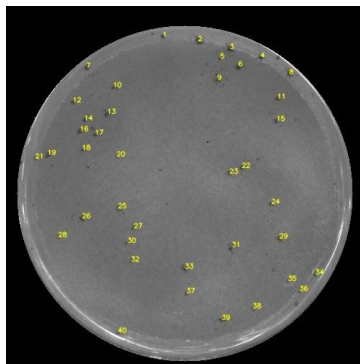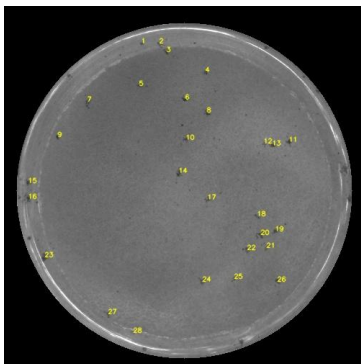

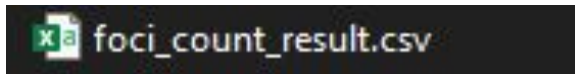

	id	foci count
0	P1_C8	52
1	P1_A1	0
2	P1_C9	68
3	P1_A3	40
4	P1_A2	28
5	P1_A6	92
6	P1_A7	84
7	P1_A5	67
8	P1_B9	105
9	P1_B8	108
10	P1_A4	35

ตัวอย่างข้อมูลภายใน foci_count_result.csv
คือไฟล์ผลลัพธ์การนับจำนวน foci ในแต่ละภาพ



ตัวอย่างข้อมูลภายใน logfile.log จะประกอบด้วยข้อมูล
status การทำงานของโปรแกรม

```
2021-07-14 14:30:38,736, INFO, app.py, P1, find radius: success
2021-07-14 14:30:38,838, INFO, app.py, P1, C8.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:38,911, INFO, app.py, P1, A1.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,002, INFO, app.py, P1, C9.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,058, INFO, app.py, P1, A3.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,128, INFO, app.py, P1, A2.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,271, INFO, app.py, P1, A6.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,381, INFO, app.py, P1, A7.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,453, INFO, app.py, P1, A5.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,549, INFO, app.py, P1, B9.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,637, INFO, app.py, P1, B8.jpg, foci detected: success
2021-07-14 14:30:39,703, INFO, app.py, P1, A4.jpg, foci detected: success
```